

DE

BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER ANWENDUNG DER MULTI-GYN VAGINALDUSCHE & BRAUSETABLETTEN SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE ZUM NACHLESEN AUF.

FR

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'INFORMATION AVANT D'UTILISER MULTI-GYN DOUCHE VAGINALE & COMPRIMÉS ET CONSERVER-LA POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

IT

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE FOGLIETTO INFORMATIVO PRIMA DI UTILIZZARE MULTI-GYN DOCCIA VAGINALE E COMPRESSE EFFERVESCENTI E CONSERVARLO COME RIFERIMENTO.

Multi-Gyn Vaginaldusche für eine optimale Vaginalhygiene

- Spült effizient und sanft.
- Das spezielle Ventil verhindert das Zurücksaugen der Flüssigkeit, reduziert den Druckaufbau und sorgt für einen idealen Spüleffekt.
- Ergonomische Duschvorrichtung, die in verschiedenen Positionen verwendet werden kann.

Indikationen

Multi-Gyn Vaginaldusche und Brausetabletten sind ideal für die allgemeine Vaginalpflege. Es erzeugt eine natürliche und milde Spüllösung für eine optimale Vaginalhygiene.

Dieses Produkt ist nicht für die Behandlung von sexuell übertragbaren Krankheiten bestimmt.


Bitte beachten Sie!

Die Multi-Gyn Vaginaldusche darf nicht in kochendes Wasser gelegt oder mit kochendem Wasser gereinigt werden. Sie wird dadurch irreparabel deformiert.

Anwendungshinweise

Die Multi-Gyn-Vaginaldusche ist so konzipiert, dass sie bequem angewendet werden kann. Finden Sie die für Sie zur Anwendung bequemste Position. Unsere Empfehlung: Verwenden Sie die Vaginaldusche am besten in einer Badewanne, Dusche oder über einer Toilette sitzend, damit die Flüssigkeit leicht abfließen kann. Und damit Sie es wissen: Mit den Multi-Gyn-Brausetabletten erhalten Sie die ideale Spüllösung.

Für die Anwendung der Multi-Gyn Vaginaldusche befolgen Sie folgende Schritte:

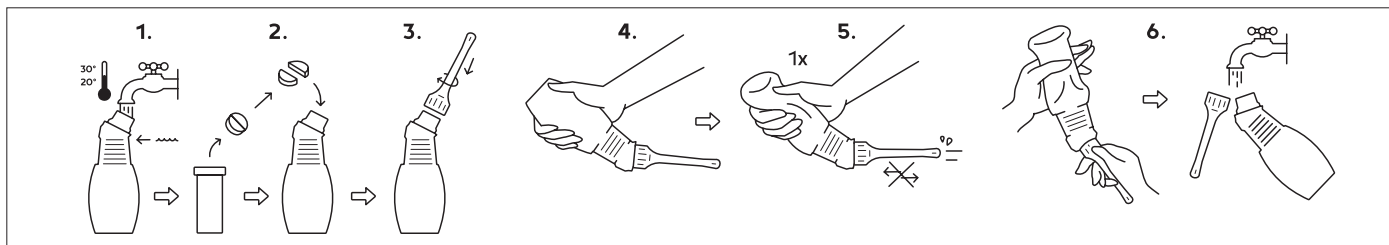

1. Füllen Sie die Multi-Gyn Vaginaldusche mit lauwarmem Wasser bis zum oberen Rand der Rippen
2. Brechen Sie eine Multi-Gyn Brausetablette durch und geben Sie diese in das Wasser
3. Schrauben Sie den Applikator auf die Flasche und warten Sie, bis sich die Multi-Gyn Brausetablette vollständig aufgelöst hat und nicht mehr sprudelt
4. Führen Sie den Applikator sanft in die Vagina ein
5. Drücken Sie die Flasche aus, um die Vagina mit der Spüllösung zu spülen. Es ist normal, dass Flüssigkeit (bis zu einer halben Flasche) in der Flasche bleibt*
6. Nehmen Sie den Applikator von der Vaginaldusche ab und spülen Sie beide gründlich mit warmem Wasser ab. Lassen Sie die Teile an der Luft trocknen (vorzugsweise an einem trockenen Ort)

* Die Flüssigkeitsmenge reicht aus, um die Vagina zu spülen. Wenn Sie erneut mit der verbleibenden Flüssigkeit spülen möchten, schrauben Sie den Applikator von der Flasche, so dass die Flasche wieder ihre ursprüngliche Form annimmt, und fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Bitte beachten Sie!

- Kontaktieren Sie bei anhaltenden oder wiederkehrenden vaginalen Beschwerden immer einen Arzt.
- Die Multi-Gyn Vaginaldusche ist kein Verhütungsmittel.
- Die Multi-Gyn Vaginaldusche darf nicht in kochendes Wasser gelegt oder mit kochendem Wasser gereinigt werden. Sie wird dadurch irreparabel deformiert.
- Lagern Sie Multi-Gyn Brausetabletten in der Originalverpackung an einem trockenen Ort.

Multi-Gyn Vaginaldusche und Schwangerschaft

Wenn Sie schwanger werden möchten, empfehlen wir Ihnen, die Multi-Gyn Vaginaldusche erst 3 Tage nach dem Geschlechtsverkehr anzuwenden. Es gibt keine bekannten Kontraindikationen für die Anwendung der Multi-Gyn Vaginaldusche oder Multi-Gyn Brausetabletten während der Schwangerschaft oder Stillzeit. Wir raten Ihnen jedoch immer sich im Falle einer Schwangerschaft mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt zu beraten.

Douche vaginale Multi-Gyn pour une hygiène vaginale optimale

- Lave efficacement et en douceur.
- Valve spéciale qui empêche tout reflux de la solution et réduit la formation de pression dans le vagin, créant ainsi un effet lavant idéal.
- Dispositif de douche ergonomique, qui peut être utilisé dans différentes positions.

Indications

Multi-Gyn Douche vaginale et comprimés effervescents, la solution idéale pour un soin vaginal global. Les comprimés Multi-Gyn permettent de préparer une solution de douche naturelle et douce pour une hygiène vaginale optimale.

Ce produit n'est pas destiné au traitement des maladies sexuellement transmissibles.

Veillez noter !

La bouteille de douche vaginale Multi-Gyn ne doit jamais être plongée dans de l'eau bouillante ni être nettoyée avec de l'eau bouillante au risque d'être irréremédiablement déformée.

Conseils d'utilisation

La douche vaginale Multi-Gyn est conçue pour votre bien-être, il s'agit de trouver la position la plus confortable pour vous. Notre astuce : il est préférable de l'utiliser en position assise sur une baignoire, dans la douche ou sur les toilettes, afin que le liquide puisse s'écouler facilement. Et les comprimés effervescents Multi-Gyn permettent de préparer une solution de lavage vaginal idéale.

Pour utiliser la douche vaginale Multi-Gyn, il suffit de suivre les étapes ci-dessous :

1. Remplir la bouteille de douche vaginale Multi-Gyn avec de l'eau tiède jusqu'au bord supérieur des rainures
2. Casser un comprimé effervescent Multi-Gyn et l'ajouter à l'eau
3. Visser l'applicateur sur la bouteille et attendre que le comprimé effervescent Multi-Gyn soit complètement dissous et ne pétill plus
4. Introduire en douceur l'applicateur dans le vagin
5. Presser la bouteille pour laver le vagin avec la solution. Il est normal que la solution (jusqu'à la moitié de la bouteille) reste dans la bouteille*
6. Retirer l'applicateur de la bouteille et rincer abondamment à l'eau chaude. Laisser sécher naturellement (de préférence dans un endroit sec)

* La quantité de solution est suffisante pour laver le vagin. Si vous souhaitez procéder à un nouveau lavage avec la solution restante, dévissez l'applicateur de la bouteille, pour qu'elle reprenne sa forme initiale et recommencez à partir de l'étape 4.

Veillez noter !

- En cas de troubles vaginaux persistants ou récidivants, il faut toujours consulter un médecin.
- La douche vaginale Multi-Gyn n'est pas un moyen de contraception.
- La bouteille de douche vaginale Multi-Gyn ne doit jamais être plongée dans de l'eau bouillante ni être nettoyée avec de l'eau bouillante au risque d'être irréremédiablement déformée.
- Conserver les comprimés effervescents Multi-Gyn dans le tube d'origine, dans un endroit sec.

Douche vaginale Multi-Gyn et grossesse

Si vous souhaitez être enceinte, nous vous conseillons de ne pas utiliser la douche vaginale Multi-Gyn pendant les 3 jours suivant un rapport sexuel. Il n'existe aucune contre-indication connue à l'utilisation de la douche vaginale Multi-Gyn ou des comprimés effervescents Multi-Gyn pendant la grossesse et l'allaitement. Cependant, nous vous conseillons toujours de contacter votre médecin si vous êtes enceinte.

Multi-Gyn Doccia vaginale per un'igiene ottimale della vagina

- Risciacquo pulito, efficace e delicato.
- Valvola speciale che impedisce il risucchio del fluido, riduce l'accumulo di pressione e crea un effetto di risciacquo ideale.
- Dispositivo di irrigazione ergonomico che può essere utilizzato in varie posizioni.

Indicazioni

Multi-Gyn Doccia vaginale e compresse effervescenti, è ideale per la cura generale della vagina.

Questo prodotto non è destinato al trattamento delle malattie a trasmissione sessuale. Le compresse effervescenti Multi-Gyn creano un liquido detergente naturale e delicato per un'igiene vaginale ottimale.

Nota bene!

Non immergere mai Multi-Gyn Doccia vaginale in acqua bollente e non pulirla con acqua bollente. Si deformerà in modo irreparabile.

Istruzioni per l'uso

Multi-Gyn Doccia vaginale è stato progettato per garantire il massimo comfort, quindi si tratta di trovare la posizione che fa per voi. Il nostro consiglio: è meglio utilizzarlo sopra una vasca da bagno, una doccia o una toilette, in modo che il liquido possa scorrere via facilmente. Inoltre, le compresse effervescenti Multi-Gyn contribuiscono a creare il liquido ideale per la lavanda.

Per utilizzare Multi-Gyn Doccia vaginale, è sufficiente seguire i seguenti passaggi:

1. Riempire Multi-Gyn Doccia vaginale con acqua tiepida fino a sopra la parte ondulata
2. Rompere una compressa effervescente Multi-Gyn e aggiungerla all'acqua
3. Avvitare l'applicatore sul flacone e attendere che la compressa effervescente Multi-Gyn sia completamente sciolta e smetta di frizzare
4. Inserire delicatamente l'applicatore nella vagina
5. Comprimerla il flacone per detergere la vagina con il liquido per la lavanda. È normale che nel flacone rimanga del liquido (fino a mezzo flacone)*
6. Separare la doccia e l'applicatore e risciacquare accuratamente con acqua tiepida. Lasciare asciugare naturalmente (preferibilmente in un luogo asciutto)

* La quantità di liquido è sufficiente per sciacquare la vagina. Se si desidera ripetere il risciacquo con il liquido rimanente, svitare l'applicatore dal flacone in modo che il flacone ritorni alla sua forma originale e continuare dal punto 4.

Nota bene:

- Contattare sempre un medico in caso di disturbi vaginali persistenti o ricorrenti.
- Multi-Gyn Doccia vaginale non è un contraccettivo.
- Non immergere mai Multi-Gyn Doccia vaginale in acqua bollente e non pulirla con acqua bollente. Si deformerebbe in modo irreparabile.
- Conservare le compresse Multi-Gyn nel contenitore originale in un luogo asciutto.

Multi-Gyn Doccia vaginale e gravidanza

Se si desidera una gravidanza, si consiglia di non utilizzare Multi-Gyn Doccia vaginale fino a 3 giorni dopo un rapporto sessuale. Non ci sono controindicazioni note all'uso di Multi-Gyn Doccia vaginale o Multi-Gyn Compresse effervescenti durante la gravidanza o l'allattamento. Tuttavia, si consiglia sempre di contattare il proprio medico in caso di gravidanza.

Multi-Gyn® Brausetabletten / Comprimés effervescents / Compresse effervescenti

Mit den Multi-Gyn-Brausetabletten erhalten Sie eine natürliche und sanfte Spüllösung für eine optimale Vaginalhygiene

- Eine Brausetablette ist ausreichend für die Herstellung einer Flasche Spüllösung
- Enthält natürliche Inhaltsstoffe und ist parfümfrei
- Zur Verwendung in Kombination mit der Multi-Gyn Vaginaldusche für eine optimale Vaginalhygiene

Milde Brausetabletten mit natürlichen Inhaltsstoffen zur Herstellung einer milden Vaginalspüllösung

Mit den Multi-Gyn Brausetabletten, aufgelöst in lauwarmem Wasser, können Sie eine milde Spüllösung herstellen, die sich für die Verwendung mit der Multi-Gyn Vaginaldusche eignet. Die konzentrierten Brausetabletten enthalten natürliche Inhaltsstoffe.

Ingredients

Lactose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Lactic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Ascorbic Acid

Hauptinhaltsstoff 2QR-Komplex-Pulver: gereinigt aus Aloe-Barbadensis-Blattextrakt

Multi-Gyn Brausetabletten enthalten natürliche Inhaltsstoffe und sind frei von Duftstoffen. Die Brausetabletten haben ein körniges Aussehen und können in farblich leicht variieren. Diese geringfügigen Abweichungen hängen mit den natürlichen Eigenschaften des Hauptwirkstoffs 2QR-Komplex zusammen. Sie haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit oder Sicherheit des Produkts.

Lagerung

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren. Es wird empfohlen, die Multi-Gyn Brausetabletten in der Originalverpackung an einem trockenen Ort zwischen 10°C und 25°C (Raumtemperatur) aufzubewahren.

Die Brausetabletten sind nicht zur oralen Einnahme bestimmt.

Les comprimés effervescents Multi-Gyn permettent de préparer une solution de douche naturelle et douce pour une hygiène vaginale optimale

- Un comprimé effervescent suffit pour une bouteille de solution de douche
- Avec des ingrédients naturels et sans parfum
- Associés à la douche vaginale Multi-Gyn, les comprimés effervescents assurent une hygiène vaginale optimale

Comprimés effervescents pour douche vaginale douce, avec des ingrédients naturels

Les comprimés effervescents Multi-Gyn, dissous dans de l'eau tiède, permettent de préparer une solution de douche douce, appropriée à une utilisation la douche vaginale Multi-Gyn. Les comprimés effervescents concentrés contiennent des ingrédients naturels.

Ingredients

Lactose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Lactic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Ascorbic Acid

Principal ingrédient du complexe 2QR en poudre extrait purifié de feuilles d'aloë vera

Les comprimés effervescents Multi-Gyn contiennent des ingrédients naturels et sont sans parfum. Les comprimés effervescents ont un aspect granuleux et leur couleur peut varier légèrement. Ces variations mineures sont dues aux propriétés naturelles du principal ingrédient actif, le complexe 2QR. Elles n'ont aucune incidence sur l'efficacité ou la sécurité du produit.

Conservation

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. Il est recommandé de conserver les comprimés effervescents Multi-Gyn dans leur tube d'origine, dans un endroit sec, à une température comprise entre 10 °C et 25 °C (température ambiante).

Les comprimés effervescents ne sont pas destinés à une administration par voie orale.

Le compresse effervescent Multi-Gyn creano un liquido detergente naturale e delicato per un'igiene vaginale ottimale

- Una compressa effervescente è sufficiente per un flacone di liquido per irrigazione
- Contiene ingredienti naturali ed è priva di profumo
- In combinazione con Multi-Gyn Doccia vaginale, le compresse effervescenti offrono un'igiene vaginale ottimale

Compresse effervescenti per lavande vaginali delicate con ingredienti naturali

Le compresse effervescenti Multi-Gyn, disciolte in acqua tiepida, creano un liquido per irrigazione delicato, adatto all'uso con Multi-Gyn Doccia vaginale. Le compresse effervescenti concentrate contengono ingredienti naturali.

Ingredients

Lactose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Lactic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Ascorbic Acid

Ingrédiente principale complesso 2QR in polvere purificato da estratto di foglie di Aloe Barbadensis

Le compresse effervescenti Multi-Gyn contengono ingredienti naturali e sono prive di profumo. Le compresse effervescenti hanno un aspetto granuloso e possono variare leggermente di colore. Queste piccole variazioni sono legate alle proprietà naturali del principale principio attivo, il complesso 2QR. Non influiscono sull'efficacia o sulla sicurezza del prodotto.

Conservazione

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Si consiglia di conservare le compresse Multi-Gyn nel contenitore originale in un luogo asciutto a una temperatura compresa tra 10°C e 25°C (temperatura ambiente).

Le compresse effervescenti non sono per uso orale.